

ARCHITECT c4000

Создано для биохимии Работает на вас

- Сопоставимые результаты на всех анализаторах ARCHITECT
- Передовые технологии дают уверенность в результатах
- Небольшой размер – большие возможности



CHOOSE TRANSFORMATION / ВЫБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ

Уверенность в результатах. Возможность интеграции.

ЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО АНАЛИЗАТОРОВ

- Идентичные технологии, реагенты и протоколы тестирования
- Одинаковое, интуитивно понятное программное обеспечение ARCHITECT
- Универсальные штативы для образцов ARCHITECT

Ваши преимущества: сопоставимые результаты исследований на всех анализаторах ARCHITECT, простота и удобство в эксплуатации.



Универсальный штатив
для образцов ARCHITECT

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗАТОРОВ И ТЕСТ-СИСТЕМ

- Технология FlexRate увеличивает диапазон линейности при определении активности ферментов, что позволяет получать достоверные результаты с первого раза и снизить количество повторных тестов
- ICT-модуль (Integrated Chip Technology) – компактный чип для определения электролитов имеет большой срок службы и прост в обслуживании (60 000 определений)
- Максимальная производительность до 800 тестов в час
- Датчики давления и уровня жидкости позволяют выявить сгусток, пузырьки, пену или недостаточность образца при пипетировании для снижения вероятности аналитической ошибки.



В натуральную величину

Ваши преимущества: уверенность в достоверности результатов клинических исследований.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСТИННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

- Может работать в истинной интеграции с иммунохимическим анализатором ARCHITECT i1000sr
- Оптимизация работы при выполнении биохимических и иммунохимических тестов из одной пробирки
- Роботизированный загрузчик штативов RSH (Robotic Sample Handler) обеспечивает приоритизацию образцов
- Единоновременно около 55 различных реагентов на борту
- Технология SmartWash предотвращает перенос биоматериала между образцами (менее 0,1 ppm*).

*ppm, "parts per million" – частиц на миллион

Ваши преимущества: при работе в единой платформе достаточно одного оператора для эффективного решения сложных задач.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)
E-mail: info.add.russia@abbott.com
Сайт: www.abbott-russia.ru


Для получения информации о предупреждениях, мерах предосторожности и ограничениях использования оборудования обратитесь, пожалуйста, к руководству по эксплуатации. Руководство по эксплуатации можно найти на www.abbottdiagnostics.com

ARCHITECT, i1000sr, c4000, FlexRate and SmartWash являются торговыми марками Abbott Laboratories в различных юрисдикциях. Все анализаторы ARCHITECT относятся к Классу 1 по стандарту лазерной безопасности.



ARCHITECT c4000

может быть интегрирован с анализатором ARCHITECT i1000sr для консолидации биохимического и иммунохимического тестирования на одной платформе.

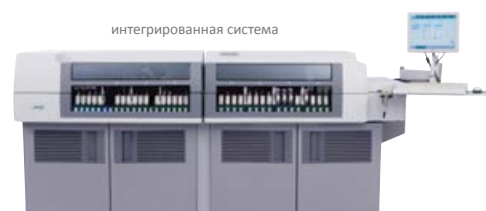

интегрированная система

Ждем вас на сайте AbbottDiagnostics.com/Transform

